

2026年6月吉日

販売会社 各位

日本ハム株式会社
中央研究所 ヘルスサポート課

食物アレルギー簡易迅速検査キット

「FASTKIT スリムIIシリーズ」発売のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、食物アレルギー簡易迅速検査キット(定性キット)「FASTKIT スリムシリーズ」の後継品として「FASTKIT スリムIIシリーズ」を発売いたします。

つきましては、発売時期および現行品との変更点について、下記の通りご案内申し上げます。よろしくお願ひ申し上げます。

敬 具

記

1. 後継品商品名：

- | | |
|--------------------|------------------------|
| ・FASTKIT スリムII 卵 | ・FASTKIT スリムII 甲殻類 |
| ・FASTKIT スリムII 牛乳 | ・FASTKIT スリムII くるみ |
| ・FASTKIT スリムII 小麦 | ・FASTKIT スリムII カシューナッツ |
| ・FASTKIT スリムII そば | ・FASTKIT スリムII 大豆 |
| ・FASTKIT スリムII 落花生 | |

2. 後継品発売時期 ：2026年7月から順次

* 現行品は在庫が無くなり次第、販売を終了いたします。

* ロット番号は随時お知らせいたします。

発売スケジュール (暫定)

- | | |
|----------|------------|
| 2026年7月 | 牛乳、そば |
| 2026年8月 | 甲殻類 |
| 2026年9月 | 卵、落花生、大豆 |
| 2026年10月 | くるみ |
| 2027年4月 | 小麦、カシューナッツ |

3. 製品仕様：

FASTKIT スリムIIシリーズへの切替えに伴い、以下の項目を変更いたします。詳細は別紙をご確認ください。記載した項目以外は変更ありませんので、現行品と同様にお使いいただけます。

変更箇所	現行品 FASTKIT スリムシリーズ	後継品 FASTKIT スリムIIシリーズ
テストストリップサイズ	60 mm×5 mm	80 mm×5 mm
外箱サイズ	110 mm×50 mm×106 mm	110.5 mm×53.0 mm×124.5 mm
包装・包材	2テスト/袋、アルミ蒸着フィルム	1テスト/袋、透明蒸着フィルム
構成※	テストストリップ (2本×10) 濃縮抽出用緩衝液、希釈用緩衝液 ユニパック、取扱説明書	テストストリップ (1本×20) ※※ 濃縮抽出用緩衝液、希釈用緩衝液 ※※※
使用期限	12 か月	18 か月

※：後継品は取扱説明書を同梱しておりません。

キット外箱の二次元コードからご確認ください。

※※：個包装化に伴い、ユニパックは同梱いたしません。

※※※：後継品の各緩衝液は現行品の組成と変更はありません。

4. サンプルのご提供

ご希望されるユーザー様には当社よりご送付させていただきますので、ご連絡ください。


以上

(別紙) テストストリップサイズ、包装形態の変更詳細

主な変更点1：テストストリップサイズの変更

(現行品)

(後継品)

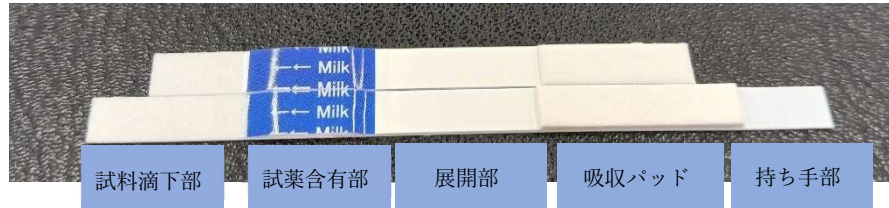

変更点1-① 吸収パッド上部に持ち手部を設置

→テストストリップの持ち運びが便利になり、検体名等を記載できるスペースを設けました。

変更点1-② 吸収パッドのサイズ変更

→吸収パッドを長く、厚くし、検体液を吸い取りやすいように設計しました。

変更点1-③ 試料滴下部のサイズ変更

→試料滴下部面積を大きくし、試料を滴下しやすいように設計しました。

主な変更点2：包装形態の変更

(現行品)

(後継品)



(オモテ)

(ウラ)



変更点2-① テストストリップ包装を透明蒸着フィルムに変更

→直射日光をさけて冷蔵保存してください。

変更点2-② 個包装×20テスト入りに変更

→内容量は変わらず個包装となったため、ユーザー様の使用頻度に合わせてお使いいただけます。

主な変更点3：外箱サイズの変更

(現行品)

(後継品)



以上