

磁気ビーズを用いた核酸やタンパク質精製のセパレーター
用途に合わせて 5 種類をラインアップ！

MagListo™ Magnetic Separation Rack

磁気ビーズを用いた核酸抽出やタンパク質精製に
ご使用いただけるマグネットセパレーターです。
チューブ用を 4 種類、
96 ウェルプレート用を 1 種類用意しております。



磁気ビーズで核酸やタンパク質を高速精製！

マグネットラックと磁気ビーズを組み合わせることによって、従来のカラムを用いる手法よりもはるかに簡単かつ迅速に核酸やタンパク質を精製することができます。MagListo™ Magnetic Separation Rack 内部にはホールド力に優れたシリコンゴムが配置されており、チューブを挿したラックを反転させるだけで廃液を除くことができます。

記事 ID 検索 **16450** 詳しい情報は Web へ

コスモ・バイオホームページのサイト内検索エンジン「記事 ID 検索」に、記事 ID (上アイコンの数字) を入力するとダイレクトにページへ行けます。

貸出用のデモ機をご用意しております。
営業部 TEL：03-5632-9610 までお問い合わせください。

※デモ機のご用意は、8-channel multi-pipette 用 (品番：TM-1000)、2 mL チューブ用 (品番：TM-1010)、15 mL チューブ用 (品番：TM-1020)、50 mL チューブ用 (品番：TM-1030) の 4 種類です。

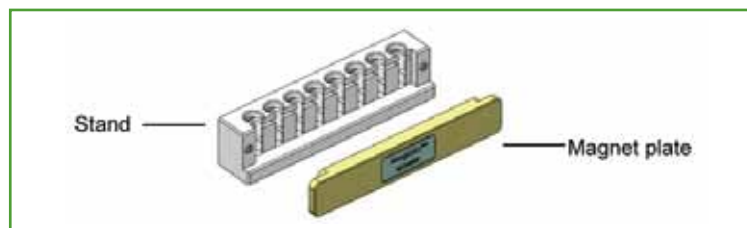


図 1. スタンドとマグネットプレート (MagListo™-2、-8Ch)

デモ機
あります

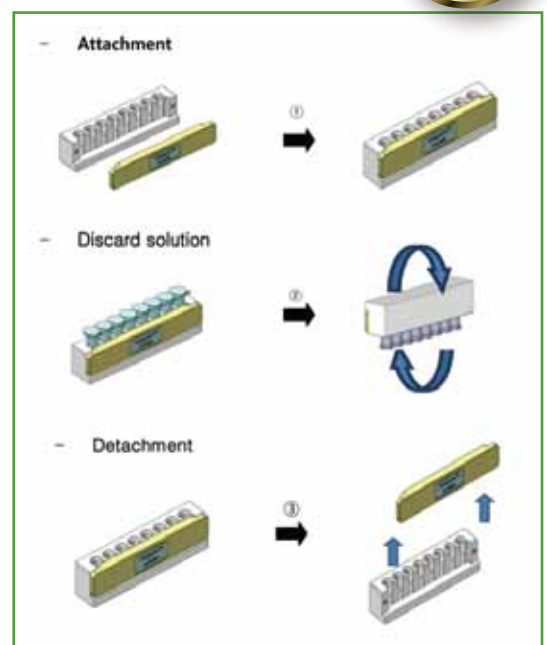


図 2. マグネットセパレーターの使用方法

特長

- 磁気ビーズを用いた迅速な核酸／タンパク質精製に最適
プラスミド DNA の場合、5 分～ 15 分以内で精製可能
mini：5 分、midi：10 分、maxi：15 分
(Bioneer 社 MagListo™ 5M Plasmid Extraction kit 使用時)
- 核酸／タンパク質を高純度で回収
- 遠心分離不要
- ラック内部にはホールド力の優れたシリコンゴムを配置！
ラックを反転させて廃液の除去が可能



図 3. 廃液の除去




人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

商品情報

サンプル容量に応じて、下記の5種類をラインアップ。また、お得な4種類 (MagListo™-2、-15、-50、-96) のセットもご用意しました。

				Bioneer Corporation		メーカー略号: BIN	
品名	サイズ (mm W/D/H)	重量	サンプル容量	品番	包装	希望販売価格	
[8-channel multi-pipette] 8連のピペットを使用して最大8サンプルを処理可能							
MagListo™-8Ch Magnetic Separation Rack							
	スタンド	104x23x31	105 g	1 mL tube x 8	TM-1000	1 each	¥54,000
	磁気プレート	104x8x23					
[2 mL, mini] 一般的な mini スケールで最大8サンプルを処理可能							
MagListo™-2 Magnetic Separation Rack							
	スタンド	136x27x33	150 g	2 mL tube x 8	TM-1010	1 each	¥54,000
	磁気プレート	136x9.5x25					
[15 mL, midi] 従来のカラム法よりも迅速! midi スケールで最大6サンプルを処理可能							
MagListo™-15 Magnetic Separation Rack							
	スタンド	164x37x78	525 g	15 mL tube x 6	TM-1020	1 each	¥97,000
	磁気プレート	164x11x58.5					
[50 mL, maxi] 従来のカラム法よりも迅速! maxi スケールで最大3サンプルを処理可能							
MagListo™-50 Magnetic Separation Rack							
	スタンド	154x47.5x76	530 g	50 mL tube x 3	TM-1030	1 each	¥97,000
	磁気プレート	154x11x58.5					
[96-well plate] 96-well plate - 96 ウェルフォーマットで最大96サンプルを処理可能							
MagListo™-96 Magnetic Separation Rack							
	磁気プレート	150x114x19	1176 g	96 well plate x 1	TM-1040	1 each	¥145,000
	シリコンパッキング アプリーケーター	135x90x12					
	アダプター	125x83.4x41.2					
	トップカバー	140x106x87.2					
MagListo™-2、-15、-50、-96の4商品のセット品							
MagListo™ Magnetic Separation Rack Bundle Set							
					TM-1100	1 set	¥316,000

関連商品

		Bioneer Corporation		メーカー略号: BIN	
品名	品番	包装	希望販売価格		
磁気ビーズを使って、大腸菌培養液からプラスミド DNA を迅速に抽出できるキット					
MagListo™ 5M Plasmid Extraction Kit	K-3601	1 kit [100 rxn in mini x 1 mL]	¥21,000		
	K-3600	1 kit [500 rxn in mini x 1 mL]	¥74,000		

取扱店

お願い / 注意事項

記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

〔希望販売価格〕 記載の希望販売価格は2016年12月1日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようようお願い申し上げます。表示価格に消費税は含まれておりません。

〔使用範囲〕 記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

<http://www.cosmobio.co.jp/>



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

- 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9623
- 商品に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル